



Mascarilla VNI VariFit



Cuidados Intensivos ▪ Mascarillas VNI

Mascarilla VariFit™ con tecnología AIR°gel®

La mascarilla para VNI de un solo uso VariFit incorpora la tecnología AIR°gel® para un mayor confort del paciente. Con código de color en el codo para permitir una correcta selección de la mascarilla para su uso en CPAP/Binivel, o VNI con circuitos respiratorios de uno o dos ramales. El arnés de liberación rápida está diseñado para ajustarse rápidamente al paciente mejorando su confortabilidad.


Video disponible en www.intersurgical-es.com

AIR°gel® Máximo confort, mínimo peso
AIR°gel® minimiza los puntos de presión y la irritación de la piel

Tecnología avanzada en la almohadilla™
La almohadilla ergonómica tipo gel consigue un sellado eficaz mediante un ajuste confortable

Conector para el arnés activo™
Se mueve con el paciente para un sellado eficaz

Codo movable 360°
Para un óptimo posicionamiento de la tubuladura y fácil movilidad

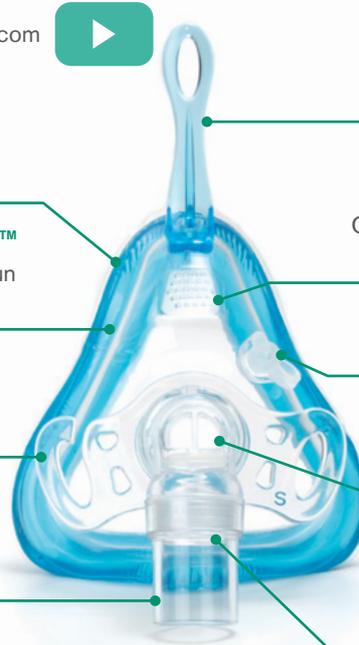

Ajuste frontal al aire™

Proporciona estabilidad y mantiene el sellado sin entrar en contacto con la piel del paciente

Mascarilla con salida exhalatoria (2260000, 2261000, 2262000 y 2277000)

Opción con salida exhalatoria y válvula anti-asfíxia para usar con dispositivos CPAP o Binivel

Puerto de Oxígeno

Para la administración de oxígeno suplementario

Válvula anti-asfíxia

Evita la reinhalación de CO₂ en el caso de una ventilación inadecuada

Codos con código de color

Permite una correcta selección de la mascarilla

Referencia	Descripción	Código color codo	Uds./caja
Para usar con circuitos respiratorios de un ramal sin salida espiratoria			
2260000	Mascarilla VariFit con válvula anti-asfíxia y salida exhalatoria. Tamaño adulto pequeño	○	8
2261000	Mascarilla VariFit con válvula anti-asfíxia y salida exhalatoria. Tamaño adulto mediano	○	8
2262000	Mascarilla VariFit con válvula anti-asfíxia y salida exhalatoria. Tamaño adulto grande	○	8
2277000	Mascarilla VariFit con válvula anti-asfíxia y salida exhalatoria. Tamaño adulto extra grande	○	8
Para usar con circuitos respiratorios de un ramal con salida espiratoria			
2263000	Mascarilla VariFit con válvula anti-asfíxia y sin salida exhalatoria. Tamaño adulto pequeño	◐	8
2264000	Mascarilla VariFit con válvula anti-asfíxia y sin salida exhalatoria. Tamaño adulto mediano	◐	8
2269000	Mascarilla VariFit con válvula anti-asfíxia y sin salida exhalatoria. Tamaño adulto grande	◐	8
2278000	Mascarilla VariFit con válvula anti-asfíxia y sin salida exhalatoria. Tamaño adulto extra grande	◐	8
Para usar con circuitos respiratorios de doble ramal			
2265000	Mascarilla VariFit sin válvula anti-asfíxia y sin salida exhalatoria. Tamaño adulto pequeño	●	8
2266000	Mascarilla VariFit sin válvula anti-asfíxia y sin salida exhalatoria. Tamaño adulto mediano	●	8
2267000	Mascarilla VariFit sin válvula anti-asfíxia y sin salida exhalatoria. Tamaño adulto grande	●	8
2279000	Mascarilla VariFit sin válvula anti-asfíxia y sin salida exhalatoria. Tamaño adulto extra grande	●	8



Make an enquiry

AIRgel es una marca registrada de Sleepnet Corporation. Flexible Spacebar, Advanced Cushion Technology y Active Headgear Connector son marcas registradas de Sleepnet Corporation.

Please think before you print

Save energy and paper. If you must print this information sheet please print it double sided.

IS1.41 ES • Issue 5 10.17